MANUAL DO PROPRIETÁRIO



ANDADORES COM RODAS

Freedom Walker

Sumário

1 **INFORMAÇÕES GERAIS** 3

2 **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** 3

3 **COMPONENTES** 4

4 **MONTAGEM** 5

- 4.1 INSTALAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO 6
- 4.2 INSTALAÇÃO DO APOIO DE COSTAS 7
- 4.3 INSTALAÇÃO DO CESTO 8

5 **ABERTURA E FECHAMENTO** 10

6 **AJUSTE DE ALTURA** 11

7 **INSTRUÇÕES DE USO SEGURO** 12

- 7.1 UTILIZANDO O FREIO CONDUTOR 12
- 7.2 UTILIZANDO O FREIO DE ESTACIONAMENTO 13
- 7.3 UTILIZANDO O ANDADOR 14
- 7.4 UTILIZANDO O ASSENTO 15

8 **MANUTENÇÃO** 16

- 8.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÕES 17
- 8.2 REGULAGEM DOS FREIOS 17
- 8.3 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE 18

9 **ADVERTÊNCIAS** 18

10 **DESCARTE** 19

11 **CERTIFICADO DE GARANTIA** 20

- 11.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 20
- 11.2 GARANTIA 20
- 11.3 TERMOS DE GARANTIA 20

1 INFORMAÇÕES GERAIS

As instruções deste manual são de grande importância para a sua segurança e para a garantia da vida útil do andador. Entretanto, algumas informações merecem atenção especial em virtude das consequências que sua não observância pode representar para a integridade física do usuário e para o funcionamento do equipamento veja o ADVERTÊNCIAS.

Os Andadores Freedom Walker Easy são dispositivos auxiliares de marcha. São indicados para pessoas com alterações de coordenação motora, redução de força ou resistência nos membros inferiores, ou que necessitam de apoio para caminhar sem sustentar todo o peso do corpo. Também são recomendados para usuários em recuperação pós-operatória, com limitações nos ombros e/ou dificuldade para erguer o andador durante o deslocamento.

O produto foi concebido para fornecer estabilidade e conforto em um deslocamento seguro, de modo a oferecer mais autonomia e independência funcional nas tarefas cotidianas do usuário. Além disso, o ajuste de altura de acordo com a estatura física de cada pessoa facilita a correta postura.

O dispositivo oferece quatro pontos de contato com o solo, o que amplia a base de suporte, aumenta o equilíbrio e a estabilidade e reduz o risco de quedas.

Os andadores são indicados para deslocamentos em pisos lisos ou irregulares, podendo ser utilizados tanto em ambientes internos quanto externos, assento para paradas de descanso e cesto.

A Freedom reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos, incluir ou remover itens, sem aviso prévio.

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tabela 1. Especificações Técnicas **Freedom Walker Easy**

MODELO	EASY
COM OS MANETES	
Altura do assento (D) (cm)	54,9
Altura das manoplas (J) (cm)	68,8–80
Altura total (A) (cm)	80,4–91,6
Altura dobrado (F) (cm)	91,5–104
Peso do produto (kg)	6,6
Largura total (G) (cm)	62,1
Largura dobrado (G) (cm)	62,1
Comprimento dobrado (I) (cm)	46,3
Comprimento total (H) (cm)	72,2
Peso máximo do usuário (kg)	120
Capacidade do cesto (kg)	8
Diâmetro das rodas (mm)	155
Níveis de ajuste das manoplas	5

MODELO	EASY
SEM OS MANETES	
Altura total (B) (cm)	73,5
Altura dobrado (E) (cm)	82,1
Comprimento dobrado (cm)	30

Figura 1. Referências de medidas.



3 COMPONENTES

Figura 2. Identificação de Componentes do Produto.



4 MONTAGEM

O Andador Freedom Walker Easy apresenta um design dobrável e é construído em estrutura em liga de alumínio, um material leve, o que facilita o armazenamento e transporte, especialmente em porta-malas de carros. Ao retirar o andador da embalagem, ele estará no modo fechado:

Figura 3. Andador no modo fechado.



Remova todos os lacres de proteção para liberar as peças soltas destinadas à montagem.

Com a estrutura base do andador posicionada verticalmente, segure a estrutura central localizada abaixo do assento e mova-a para frente, promovendo a abertura do equipamento até o completo travamento. Em seguida, levante o assento para a posição de uso na horizontal.

Figura 4. Etapas da abertura do andador.



4.1 INSTALAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO

Com o andador aberto, insira as barras de apoio nos tubos de ajuste de altura. Selecione a altura desejada e alinhe os furos, insira o parafuso no furo correspondente, certificando-se de que ele atravesse toda a estrutura. Em seguida, encaixe o manípulo na ponta do parafuso e gire-o até que a barra fique firmemente presa ao tubo.

Por fim, fixe os cabos do freio ao tubo utilizando o clipe de fixação.

Figura 5. Instalação das barras de apoio.



4.2 INSTALAÇÃO DO APOIO DE COSTAS

Com as manoplas fixas, acione o freio de estacionamento: empurre os dois manetes do freio para baixo até ouvir um "clique". Isso trava as rodas traseiras e impede que o andador se mova durante o fechamento.

Figura 6. Acionamento do freio de estacionamento.



O apoio de costas serve para permitir que usuários com mobilidade reduzida ou que cansam facilmente ao caminhar, sentem e descansem as costas com conforto, facilitando o uso do andador por períodos maiores sem fadiga. Para instalá-lo, encaixe o apoio na estrutura central do andador. Pressione o pino de travamento e empurre o tubo até que entre totalmente, certificando-se de que o pino salte para fora, indicando o travamento seguro.

Figura 7. Instalação do apoio de costas.



4.3 INSTALAÇÃO DO CESTO

O Andador Freedom Walker Easy é equipado com cesto para compras, que permite o transporte de itens durante o deslocamento, dispensando o uso de sacolas ou bolsas adicionais. O cesto pode ser instalado de duas maneiras.

Instalação frontal: posicione os ganchos do cesto na estrutura central à frente do andador, localizada nas laterais do assento, como apresentado na Figura 8. Instalação frontal do cesto..

Certifique-se de que o cesto esteja devidamente encaixado antes do uso.

Figura 8. Instalação frontal do cesto.



Instalação sob o assento: levante o assento e encaixe as alças das extremidades do cesto na estrutura central do andador (ver Figura 9. Instalação do cesto sob o assento.). Abaixe o assento e confirme se tudo está firmemente encaixado antes do uso.

Figura 9. Instalação do cesto sob o assento.



Além disso, o cesto de compras pode ser removido e carregado manualmente através de sua alça central, como apresentado na Figura 10. Utilizando o cesto separadamente..

Figura 10. Utilizando o cesto separadamente.



5 ABERTURA E FECHAMENTO

O Andador Freedom Walker Easy foi projetado para facilitar o transporte e o armazenamento, contando com um sistema prático de abertura e fechamento.

Antes de realizar qualquer um dos procedimentos, certifique-se de que o freio de estacionamento esteja acionado, evitando o deslocamento do equipamento e possíveis acidentes.

Para abrir o andador: segure a parte central localizada abaixo do assento e mova-a para frente até garantir o seu completo travamento. Em seguida, levante o assento para a posição de uso na horizontal (ver Figura 4. Etapas da abertura do andador.).

Para fechar o andador: para transporte ou armazenamento, primeiro remova o cesto de compras (caso esteja instalado). Em seguida, levante o assento, puxe a alça de fechamento e incline levemente o andador em sua direção para fechá-lo totalmente. Verifique se o equipamento está devidamente compacto e fechado antes de transportá-lo.

Figura 11. Etapas de fechamento do andador.



6 AJUSTE DE ALTURA

A altura das manoplas pode ser ajustada de acordo com a estatura do usuário, proporcionando uma postura confortável e ergonômica durante o uso, além de reduzir riscos de fadiga e tensão muscular.

Para regular a altura das manoplas, gire o manípulo para soltá-lo e retire o parafuso. Em seguida, deslize a manopla para cima (para aumentar a altura) ou para baixo (para diminuir), selecionando a posição desejada. Alinhe os furos e insira o parafuso no furo correspondente, certificando-se de que ele atravesse toda a estrutura. Encaixe novamente o manípulo na ponta do parafuso e gire-o até que a barra fique firmemente presa ao tubo.

Repita o procedimento nas duas manoplas. Confirme que ambas estejam na mesma regulagem de altura.

Figura 12. Mecanismo de regulagem de altura.



7 INSTRUÇÕES DE USO SEGURO

ATENÇÃO
Para o uso seguro do andador, é fundamental ter atenção a todos os avisos e advertências de segurança deste manual. Sempre antes de iniciar o deslocamento, apoie-se levemente no andador e verifique se ele permanece estável. Confirme que o equipamento está travado na posição aberta, que todas as rodas estão em contato com o chão e que os freios funcionam corretamente. Antes de sentar no assento, confirme que as rodas traseiras estejam travadas pelo acionamento do freio de estacionamento.

7.1 UTILIZANDO O FREIO CONDUTOR

Para desacelerar o andador, puxe simultaneamente e de forma gradual os dois manetes do freio na sua direção (para cima). Essa ação reduz a velocidade de forma progressiva e segura. Para retomar o movimento, solte lentamente os manetes até que retornem à posição original.

Figura 13. Acionamento do manete do freio.



7.2 UTILIZANDO O FREIO DE ESTACIONAMENTO

Para travar as rodas traseiras, empurre os dois manetes para baixo até ouvir um "clique" como mostrado na Figura 14. Acionamento do freio de estacionamento.. Para destravar, basta puxar os manetes para cima até que retornem à posição original. Acione o freio de estacionamento sempre antes de se sentar. Isso impede que o andador se mova enquanto estiver parado.

Figura 14. Acionamento do freio de estacionamento.



7.3 UTILIZANDO O ANDADOR

Recomenda-se que o usuário consulte um profissional de saúde para ajustar a altura do andador e receber orientações de uso seguro antes de iniciar o deslocamento.

O Andador Freedom Walker Easy possui 5 níveis de regulagem de altura, sendo indicado para usuários com estatura entre 1,40 m e 1,90 m. A capacidade máxima de carga suportada pelo equipamento é de 120 kg.

Confirme que o andador esteja totalmente aberto, o assento na posição horizontal, as quatro rodas em contato com o solo e os freios em perfeito funcionamento antes de usá-lo. Não empurre o andador por longas distâncias à frente do seu corpo, pois isso pode levar a quedas e cargas incorretas.

Com as rodas traseiras travadas, posicione-se em pé entre as laterais do andador, mantendo os pés entre as rodas traseiras. Segure firme nas manoplas e teste a estabilidade, apoiando-se gradualmente. Mantenha os pés sempre entre as rodas traseiras ou ligeiramente à frente delas. Não deixe os pés ficarem atrás das rodas traseiras durante a caminhada. Após se posicionar corretamente, destrave as rodas e comece o deslocamento de forma lenta e controlada (ver Figura 15. Posicionamento para início de deslocamento.).

Para um deslocamento mais seguro, empurre o andador para frente até que seus braços fiquem levemente esticados. Pressione os dois manetes do freio condutor e mantenha-os acionados. Dê um passo à frente, aproximando-se do andador. Solte os manetes do freio e repita o procedimento para continuar o deslocamento.

Figura 15. Posicionamento para início de deslocamento.



Para transpor pequenos obstáculos, como desníveis ou irregularidades no piso, aproxime o andador lentamente e posicione-o o mais próximo possível do obstáculo. Segure firmemente as manoplas, puxe-as levemente para cima e para trás, inclinando o andador de modo que ele fique apoiado apenas nas rodas traseiras. Avance até que as rodas dianteiras passem o obstáculo e, em seguida, retorne-as suavemente ao solo.

Atenção: Antes de realizar manobras de elevação das rodas dianteiras para transpor pequenos obstáculos, pratique em local plano e seguro, com o auxílio de um acompanhante.

7.4 UTILIZANDO O ASSENTO

Para usar o assento, confirme que as rodas traseiras estão travadas pelo freio de estacionamento.

Ao sentar, não se apoie nas manoplas como suporte principal de peso — o andador pode tombar. Use as manoplas apenas como guia para se equilibrar: segure-as levemente, vire-se de costas para o assento e baixe o corpo de forma controlada. Para levantar-se, proceda da mesma forma (ver Figura 16. Posicionamento para utilizar o assento.).

Figura 16. Posicionamento para utilizar o assento.



8 MANUTENÇÃO

Para realizar a substituição e instalação de itens no seu andador, bem como para aquisição de itens opcionais e acessórios visite a nossa página Contato Freedom. O setor de relações com clientes da Freedom indicará a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de sua localidade. Ao adquirir acessórios e opcionais que não tenham sido solicitados no pedido de manufatura do produto junto à Freedom, é recomendado que o revendedor autorizado ou assistência técnica Freedom seja consultado sobre o procedimento correto de instalação. A Freedom mantém um sistema de homologação de Assistências Técnicas Autorizadas que inclui treinamentos periódicos de capacitação e atualização dos procedimentos padrões para a realização de serviços em produtos Freedom.

ATENÇÃO

Utilize apenas peças e acessórios fornecidos pela Freedom e compatíveis com o seu modelo de produto. A Freedom não se responsabiliza por qualquer alteração não autorizada, reparos utilizando peças não originais e eventuais danos causados ao produto, ao ocupante/assistente ou à terceiros em decorrência destas alterações. Se o seu andador apresentar alguma anormalidade técnica, leve-o imediatamente ao revendedor (empresa autorizada para a comercialização). O atendimento deve incluir inspeção e posterior encaminhamento à Freedom. Se, mesmo após todas as orientações anteriores, você não estiver satisfeito com o atendimento recebido, entre em contato com o setor de Relações com Clientes da Freedom Veículos Elétricos LTDA. Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 155 – Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-290. Telefone: (53) 3284-0600. Atendimento também disponível via site https://freedom.ind.br e WhatsApp (53) 3284-0600. A equipe tomará as providências necessárias.

Os Andadores Freedom Walker Easy exigem pouca manutenção de rotina. Para manter o funcionamento adequado por muitos anos, realize as seguintes verificações:

8.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÕES


Para higienizar o andador, nunca aplique água diretamente sobre o equipamento. Utilize apenas um pano macio umedecido com água e sabão neutro. Não use métodos de limpeza a quente, produtos abrasivos ou substâncias corrosivas.

A cada semana, verifique se o assento, o apoio de costas e o cesto apresentam afundamentos, cortes ou rasgos. Observe a ocorrência de desgaste excessivo ou deformação na estrutura do andador e suas partes (alças, manípulos, manetes, freio, garfos, rodas, apoio de costas, cesto e dispositivos de travamento). Inspecione visualmente se está faltando algum item de fixação da montagem (porcas, parafusos, arruelas, etc.). Substitua itens sempre que necessário.

8.2 REGULAGEM DOS FREIOS

Para ajuste dos freios e substituição de rodas, procure uma oficina especializada em bicicletas ou cadeiras de rodas. Caso não haja acesso imediato a uma oficina, é possível realizar um ajuste temporário: Afrouxe a porca "A" e gire a porca "B" no sentido horário ou anti-horário para regular a tensão do freio. Após o ajuste, aperte novamente a porca "A". Se for necessário um ajuste adicional, afrouxe o parafuso de travamento e, com o auxílio de um alicate, puxe o cabo aproximadamente um milímetro para baixo. Em seguida, aperte novamente o parafuso de travamento. Repita o procedimento para ambos os freios.

Figura 17. Sistema de regulagem da tensão do freio.

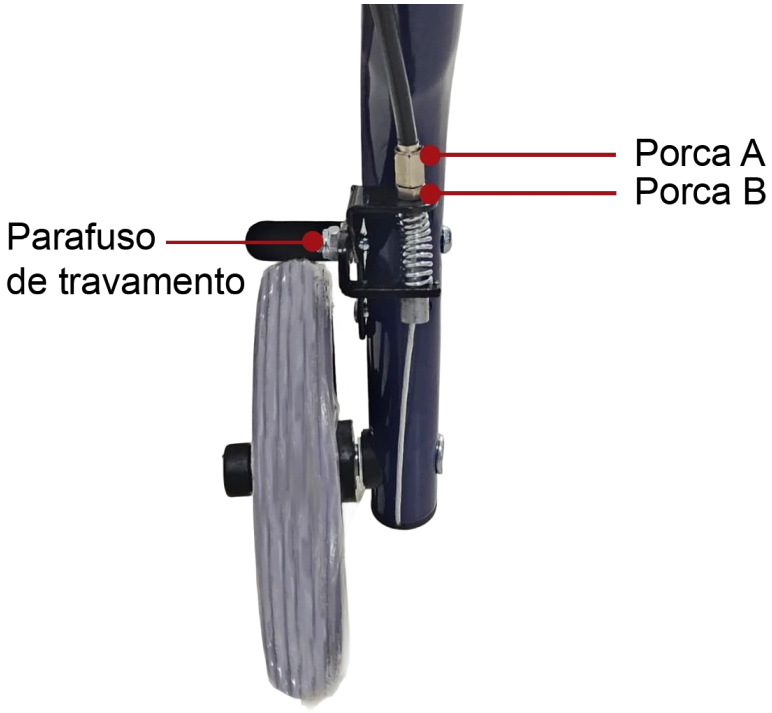

8.3 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Recomendações de armazenagem e transporte dos Andadores Freedom Walker Easy:

- Durante o transporte manusear com cuidado para evitar qualquer dano ao produto.
- Armazenar o equipamento longe de fontes excessivas de calor.

Condições de transporte e armazenagem:

- Temperatura: entre -10°C e 50°C
- Umidade: entre 10% e 95%
- Pressão atmosférica: entre 50 kPa e 106 kPa
- Manter ao abrigo da chuva
- Empilhamento máximo: 02 CAIXAS (considerando a caixa original do produto)

9 ADVERTÊNCIAS

1. Consulte um profissional da saúde para determinar se o produto atenderá às suas necessidades particulares, incluindo orientação para deslocamento seguro e ajuste de altura.
2. Consulte seu médico se você estiver fazendo uso de algum medicamento que possa afetar sua habilidade em operar seu andador de forma segura.
3. Não use este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem antes ler e entender completamente estas instruções. Mantenha este manual do proprietário à mão para poder consultá-lo a qualquer momento. Se você não estiver apto para entender os avisos, precauções e instruções, faça contato com um profissional da saúde, revendedores ou suporte técnico antes de tentar usar este equipamento.

4. Não utilize o andador nem o cesto além da capacidade de carga indicada. Consulte o ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
5. Andadores podem ser instáveis, portanto requerem cuidado no uso.
6. Verifique regularmente o funcionamento dos freios. Verifique se todas as partes estão firmemente fixadas ou se algum parafuso precisa ser ajustado. Não utilize o andador caso não esteja funcionando perfeitamente.
7. Com as rodas travadas, elas não devem se mover. Se houver movimento, regule os freios.
8. Substitua as rodas quando apresentarem sinais de desgaste.
9. Certifique-se de que seus dedos estejam livres do ponto de dobradura quando o andador estiver sendo aberto ou fechado.
10. Não pendure o seu corpo nas alças do freio. O andador pode tombar!
11. Use calçados apropriados (não escorregadios) para utilizar o andador.
12. Nunca use o andador para se deslocar caso ele não esteja completamente aberto e na posição travada.
13. Antes de se sentar no assento, certifique-se de que o andador esteja completamente aberto e na posição travada e que as rodas traseiras estejam travadas pelo freio de estacionamento.
14. Enquanto sentado, não utilize os pés para impulsioná-lo e nem deixe que empurrem o andador, pois ele não deve ser utilizado como cadeira de rodas.
15. Não use o assento caso o piso seja inclinado ou demasiadamente irregular.
16. Não fique de pé sobre o assento.
17. Não permaneça sentado no andador enquanto ele estiver em um veículo em movimento.
18. Não pendure objetos no apoio de costas.
19. Não utilize o andador em escadas ou escadas rolantes.
20. Antes de realizar manobras de elevação das rodas dianteiras para transpor pequenos obstáculos, pratique em local plano e seguro, com o auxílio de um acompanhante adulto.
21. Não armazenar o andador em ambientes úmidos, pois pode ocasionar mofo e oxidação das peças metálicas.
22. Não se desloque com o andador em vias públicas e estradas destinadas ao tráfego de automóveis. Obedeça às regras locais de tráfego de pedestre.
23. É preciso ter cuidado ao se deslocar em superfícies molhadas, inclinadas, desniveladas ou acidentadas.

10 DESCARTE

Estofamentos: Os estofamentos e partes em tecido devem ser higienizados e descartados juntos com o lixo doméstico para materiais inorgânicos.

Componentes metálicos: Para descarte, procure um ponto de coleta ou reciclagem de metais.

Componentes plásticos: Higienize e descarte no lixo doméstico para materiais inorgânicos.

Caso tenha dificuldades em localizar um centro de coleta adequado entre em contato com o órgão público responsável de sua cidade, com o revendedor ou com a Freedom.

11 CERTIFICADO DE GARANTIA

11.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Este termo de garantia é válido desde que acompanhado de cópia da nota fiscal da compra do produto perfeitamente preenchida, com identificação do proprietário e data de comercialização pela empresa vendedora.

11.2 GARANTIA

Pelo prazo de seis meses (sendo 3 meses de garantia legal e 3 meses de garantia contratual), a contar da data da emissão da nota fiscal e dentro das condições estipuladas nos "TERMOS DE GARANTIA".

11.3 TERMOS DE GARANTIA

A FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA., garante que estes são isentos de defeito de material ou de manufatura, em condições normais de uso. A obrigação da FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA. limita-se ao conserto ou substituição de quaisquer peças, dentro do período normal da garantia a que aludem estes termos, cujo exame feito pela mesma ou empresa autorizada pela mesma, revele satisfatoriamente para a Freedom, a existência do defeito reclamado. O conserto ou substituição das peças defeituosas será feito pela Freedom, sendo as despesas de fretes entre a revenda/assistência técnica e Freedom, dentro do território nacional, por conta da mesma, portanto sendo de livre escolha a transportadora. Os custos de frete entre o cliente e a revenda/assistência técnica, quando existirem, não são cobertos pela garantia. Os termos desta garantia não serão aplicáveis nos seguintes casos:

- O andador que tenha sido sujeito a uso inadequado, negligência ou acidente.
- O andador que tenha sido reparado ou alterado fora da Freedom, de modo que, no julgamento do mesma, sejam afetados seu desempenho e segurança.
- Serviços de manutenção, tais como troca de rodas, itens dos freios, etc.
- Deterioração habitual de estofados, partes em tecido e itens de aparência devido a desgaste ou exposição ao tempo.



Freedom Veículos Elétricos Ltda. Rua Conde de Porto Alegre, 155, Pelotas, RS, Brasil. CEP: 96010-290
Fone: 55 (53) 3284-0600
Para maiores informações, acesse o site: https://www.freedom.ind.br