Freedom

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



ANDADORES COM RODAS

Freedom Walker Explorer

Sumário

1 **INFORMAÇÕES GERAIS** 3
2 **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** 3
3 **COMPONENTES** 4
4 **MONTAGEM** 6

4.1 INSTALAÇÃO DAS RODAS 7
4.2 ABERTURA E FECHAMENTO 7
4.3 INSTALAÇÃO DO APOIO DE COSTAS 10
4.4 INSTALAÇÃO DO CESTO 11
4.5 INSTALAÇÃO DO PORTA-BENGALA 11
4.6 INSTALAÇÃO DO PORTA-COPO 12

5 **AJUSTE DE ALTURA** 13
6 **INSTRUÇÕES DE USO SEGURO** 13

6.1 UTILIZANDO O FREIO CONDUTOR 13
6.2 UTILIZANDO O FREIO DE ESTACIONAMENTO 14
6.3 UTILIZANDO O ANDADOR 14
6.4 UTILIZANDO O ASSENTO 15
6.5 UTILIZANDO O PEDAL DE INCLINAÇÃO 16

7 **ACESSÓRIOS OPCIONAIS** 17
8 **MANUTENÇÃO** 18

8.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÕES 19
8.2 REGULAGEM DA TENSÃO DOS FREIOS 19
8.3 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE 19

9 **ADVERTÊNCIAS** 19
10 **DESCARTE** 21
11 **CERTIFICADO DE GARANTIA** 21

11.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 21
11.2 GARANTIA 21
11.3 TERMOS DE GARANTIA 21

1 INFORMAÇÕES GERAIS

As instruções deste manual são de grande importância para a sua segurança e para a garantia da vida útil do andador. Entretanto, algumas informações merecem atenção especial em virtude das consequências que sua não observância pode representar para a integridade física do usuário e para o funcionamento do equipamento veja o ADVERTÊNCIAS.

Os Andadores Freedom Walker Explorer são dispositivos auxiliares de marcha. São indicados para pessoas com alterações de coordenação motora, redução de força ou resistência nos membros inferiores, ou que necessitam de apoio para caminhar sem sustentar todo o peso do corpo. Também são recomendados para usuários em recuperação pós-operatória, com limitações nos ombros e/ou dificuldade para erguer o andador durante o deslocamento.

O produto foi concebido para fornecer estabilidade e conforto em um deslocamento seguro, de modo a oferecer mais autonomia e independência funcional nas tarefas cotidianas do usuário. Além disso, o ajuste de altura de acordo com a estatura física de cada pessoa facilita a correta postura.

O dispositivo oferece quatro pontos de contato com o solo, o que amplia a base de suporte, aumenta o equilíbrio e a estabilidade e reduz o risco de quedas.

Os andadores são indicados para deslocamentos em pisos lisos ou irregulares, podendo ser usados tanto em ambientes internos quanto externos. Graças às rodas grandes (com dianteiras giratórias), ao assento para pausas e ao cesto, são especialmente eficientes em trajetos fora de estrada, como áreas de campo e terrenos irregulares.

A Freedom reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos, incluir ou remover itens, sem aviso prévio.

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tabela 1. Especificações Técnicas **Freedom Walker Explorer**

MODELO	Walker Explorer M	Walker Explorer G
Estatura do usuário (m)	até 1,75	acima de 1,75
Altura do assento (cm) - (**B**)	54	60
Altura das alças do freio (cm) - (**C**)	71–88	76,5–96
Peso do produto (kg)	10,5	10,6
Altura Total (cm) - (**A**)	71 - 87,8	76 - 95,3
Comprimento dobrado (cm) - (**G**)	90	92
Níveis de ajuste das alças	8 níveis	9 níveis
Largura total (cm) - (**E**)	68	
Comprimento total (cm) - (**F**)	80,5	
Largura dobrado (cm)	27,5	

MODELO	Walker Explorer M	Walker Explorer G
Altura dobrado (cm) - (**D**)	40	
Peso máximo do usuário (kg)	150	
Capacidade de carga do cesto (kg)	8	
Diâmetro das rodas (mm)	300 (12")	

Figura 1. Referências de medidas.



3 COMPONENTES

A figura a seguir identifica os componentes principais do Andador Freedom Walker Explorer.

Figura 2. Identificação de Componentes do Produto.



A figura a seguir apresenta os demais componentes.

Figura 3. Identificação de Componentes do Produto.



4 MONTAGEM

O Andador Freedom Walker Explorer apresenta um design totalmente dobrável e é construído em estrutura de alumínio, um material leve, o que facilita o armazenamento e transporte, especialmente em porta-malas de carros. Ao retirar o andador da embalagem, ele estará no modo fechado, parcialmente desmontado.

Figura 4. Peças conforme vêm na embalagem.



4.1 INSTALAÇÃO DAS RODAS

O procedimento de instalação das rodas está ilustrado na figura a seguir. O andador é equipado com dispositivo de dobra rápida e manípulo para instalação das rodas dianteiras. Para montar as rodas dianteiras, encaixe o garfo dianteiro na estrutura frontal do andador e alinhe os orifícios do garfo com os da estrutura. Em seguida, insira o manípulo pelos orifícios e aperte-o até que fique firme.

Figura 5. Instalação das rodas dianteiras.



4.2 ABERTURA E FECHAMENTO

Nesta etapa, o andador estará fechado e com as rodas já instaladas. Abra-o usando o dispositivo de dobra rápida, conforme os passos a seguir. Para erguer as barras de apoio do andador, segure as manoplas e levante as barras até ouvir um “clique”, indicando o travamento na posição de uso.

Figura 6. Elevação das barras de apoio.



Para fechar as barras de apoio, puxe o dispositivo de dobra rápida. As barras serão liberadas, permitindo compactar o andador.

Figura 7. Compactação das barras de apoio.



Com o andador na posição vertical (apoiado sobre as quatro rodas), acione o freio de estacionamento: empurre os dois manetes do freio para baixo até ouvir um "clique". Isso trava as rodas traseiras e impede que o andador se mova durante o fechamento.

Figura 8. Acionamento do freio de estacionamento.



Desencaixe a trava de fechamento localizada na estrutura em X. Com a trava solta, a estrutura ficará livre para abrir.

Figura 9. Liberação da trava de fechamento da estrutura em X.



As etapas de abertura do andador estão apresentadas na Figura 10. Etapas da abertura do andador..

Segure as manoplas e afaste-as para abrir parcialmente a estrutura. Depois, puxe a alça central para cima e empurre as laterais do assento para baixo até ouvir o “clique” de travamento completo.

Figura 10. Etapas da abertura do andador.



Para fechar o andador: levante as laterais do assento e abaixe a alça central, junte as manoplas aproximando as laterais, encaixe a trava de fechamento na estrutura em X e compacte as barras de apoio pelo dispositivo de dobra rápida. Verifique se a trava está firme antes de transportar.

4.3 INSTALAÇÃO DO APOIO DE COSTAS

As etapas de instalação do apoio de costas estão ilustradas na Figura 11. Apoio de costas.. O apoio de costas serve para permitir que usuários com mobilidade reduzida ou que cansam facilmente ao caminhar, sentem e descansem as costas com conforto, facilitando usar o andador por períodos maiores sem fadiga. Para instalar o apoio de costas, posicione as extremidades do apoio nos engates localizados na parte posterior das manoplas do andador, encaixando de cima para baixo. Confirme que estejam firmemente encaixadas antes de usar o apoio.


Figura 11. Apoio de costas.



4.4 INSTALAÇÃO DO CESTO

As etapas de instalação do cesto estão ilustradas na Figura 12. Instalação do cesto.. O Andador Freedom Walker Explorer é equipado com cesto para compras, que permite carregar itens durante o deslocamento sem sacolas ou bolsas adicionais. Para instalar o cesto, encaixe os pinos de suporte nas extremidades frontais do assento do andador, fixando-os com os parafusos. Posicione as alças laterais do cesto nos suportes e confirme que estejam firmemente encaixadas antes de usar o cesto.

Figura 12. Instalação do cesto.

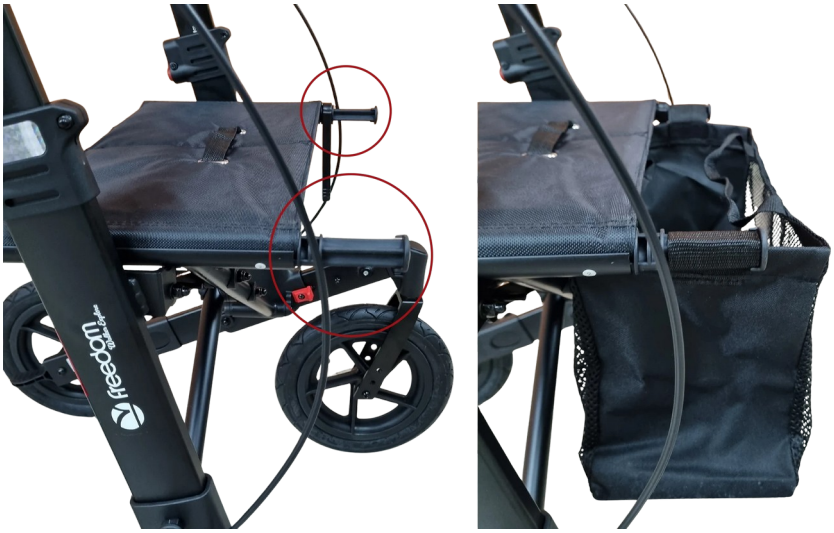

4.5 INSTALAÇÃO DO PORTA-BENGALA

O procedimento de uso do porta-bengala pode ser observado na Figura 13. Utilização do porta-bengala.. O Andador Freedom Walker Explorer possui porta-bengala integrado ao equipamento, permitindo ao usuário fácil acesso ao dispositivo e mantendo-o sempre ao alcance durante o uso. Para utilizá-lo, encaixe a abraçadeira superior e o apoio inferior, de cima para baixo, na barra de apoio esquerda ou direita do andador. Após, encaixe o corpo da bengala na abraçadeira, apoiando-a na parte inferior do suporte.

Figura 13. Utilização do porta-bengala.



4.6 INSTALAÇÃO DO PORTA-COPO

O uso do porta-copo está ilustrado na Figura 14. Suporte para copo.. O Andador Freedom Walker Explorer possui porta-copo integrado, que facilita o acesso ao acessório e permite mantê-lo sempre ao alcance do usuário durante o uso do equipamento. Para utilizá-lo, encaixe o suporte do copo, de cima para baixo, na parte superior da barra de apoio, do lado esquerdo ou direito do andador. Em seguida, encaixe o copo no suporte.

Figura 14. Suporte para copo.



5 AJUSTE DE ALTURA

O processo de regulagem das alças está ilustrado na Figura 15. Mecanismo de regulagem de altura.. A altura das manoplas pode ser ajustada de acordo com a estatura do usuário, proporcionando uma postura confortável e ergonômica durante o uso, além de reduzir riscos de fadiga e tensão muscular.

Para regular a altura das alças do freio, pressione a trava vermelha para dentro (em direção ao tubo) até que ela fique totalmente recolhida. Com a trava pressionada, deslize o tubo da alça para cima (para aumentar a altura) ou para baixo (para diminuir). Solte a trava e verifique se ela saltou de volta para fora, indicando o travamento.

Repita o procedimento nas duas manoplas. Confirme que ambas estejam na mesma regulagem de altura.

Figura 15. Mecanismo de regulagem de altura.



6 INSTRUÇÕES DE USO SEGURO

ATENÇÃO
Para o uso seguro do andador, é fundamental ter atenção a todos os avisos e advertências de segurança deste manual. Sempre antes de iniciar o deslocamento, apoie-se levemente no andador e verifique se ele permanece estável. Confirme que o equipamento está travado na posição aberta, que todas as rodas estão em contato com o chão e que os freios funcionam corretamente. Antes de sentar no assento, confirme que as rodas traseiras estejam travadas pelo acionamento do freio de estacionamento.

6.1 UTILIZANDO O FREIO CONDUTOR

O funcionamento do freio condutor está representado na Figura 16. Acionamento do manete do freio.. Para desacelerar o andador, puxe simultaneamente e de forma gradual os dois manetes do freio na sua

direção (para cima). Essa ação reduz a velocidade de forma progressiva e segura. Para retomar o movimento, solte lentamente os manetes até que retornem à posição original.

Figura 16. Acionamento do manete do freio.



6.2 UTILIZANDO O FREIO DE ESTACIONAMENTO

Para travar as rodas traseiras, empurre os dois manetes para baixo até ouvir um "clique" como mostrado na Figura 17. Acionamento do freio de estacionamento.. Para destravar, basta puxar os manetes para cima até que retornem à posição original. Acione o freio de estacionamento sempre antes de se sentar. Isso impede que o andador se mova enquanto estiver parado.

Figura 17. Acionamento do freio de estacionamento.



6.3 UTILIZANDO O ANDADOR

Recomenda-se que o usuário consulte um profissional de saúde para ajustar a altura do andador e receber orientações de uso seguro antes de iniciar o deslocamento.

Confirme que o andador esteja totalmente aberto, o assento na posição horizontal, as quatro rodas em contato com o solo e os freios em perfeito funcionamento antes de usá-lo. Não empurre o andador por longas distâncias à frente do seu corpo, pois isso pode levar a quedas e cargas incorretas.

Com as rodas traseiras travadas, posicione-se em pé entre as laterais do andador, mantendo os pés entre as rodas traseiras. Segure firme nas manoplas e teste a estabilidade, apoiando-se gradualmente. Mantenha os pés sempre entre as rodas traseiras ou ligeiramente à frente delas. Não deixe os pés ficarem atrás das rodas traseiras durante a caminhada. Após se posicionar corretamente, destrave as rodas e comece o deslocamento de forma lenta e controlada (ver Figura 18. Posicionamento para início de deslocamento.).

Para um deslocamento mais seguro, empurre o andador para frente até que seus braços fiquem levemente esticados. Pressione os dois manetes do freio condutor e mantenha-os acionados. Dê um passo à frente, aproximando-se do andador. Solte os manetes do freio e repita o procedimento para continuar o deslocamento.

Figura 18. Posicionamento para início de deslocamento.



6.4 UTILIZANDO O ASSENTO

Para usar o assento, confirme que as rodas traseiras estão travadas pelo freio de estacionamento.

Ao sentar, não se apoie nas manoplas como suporte principal de peso — o andador pode tombar. Use as manoplas apenas como guia para se equilibrar: segure-as levemente, vire-se de costas para o assento e baixe o corpo de forma controlada. Para levantar-se, proceda da mesma forma (ver Figura 19. Posicionamento para utilizar o assento.).

Figura 19. Posicionamento para utilizar o assento.



6.5 UTILIZANDO O PEDAL DE INCLINAÇÃO

O uso do pedal de inclinação está demonstrado na Figura 20. Uso do pedal de inclinação.. Quando for necessário elevar as rodas dianteiras para transpor pequenos obstáculos, segure firmemente as manoplas, posicione o pé sobre o pedal localizado próximo à roda traseira e pressione o pedal para baixo, provocando a elevação das rodas dianteiras. A manobra pode ser executada em qualquer um dos lados, conforme a preferência do usuário.

Figura 20. Uso do pedal de inclinação.



7 ACESSÓRIOS OPCIONAIS

O Andador Freedom Walker Explorer possui um Cesto Especial opcional (ver Figura 21. Cesto Especial.), maior e mais reforçado, com fechamento em velcro. Ele comporta objetos pessoais e volumes maiores que o cesto padrão.

Figura 21. Cesto Especial.



8 MANUTENÇÃO

Para realizar a substituição e instalação de itens no seu andador, bem como para aquisição de itens opcionais e acessórios visite a nossa página Contato Freedom. O setor de relações com clientes da Freedom indicará a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de sua localidade. Ao adquirir acessórios e opcionais que não tenham sido solicitados no pedido de manufatura do produto junto à Freedom, é recomendado que o revendedor autorizado ou assistência técnica Freedom seja consultado sobre o procedimento correto de instalação. A Freedom mantém um sistema de homologação de Assistências Técnicas Autorizadas que inclui treinamentos periódicos de capacitação e atualização dos procedimentos padrões para a realização de serviços em produtos Freedom.

ATENÇÃO

Utilize apenas peças e acessórios fornecidos pela Freedom e compatíveis com o seu modelo de produto. A Freedom não se responsabiliza por qualquer alteração não autorizada, reparos utilizando peças não originais e eventuais danos causados ao produto, ao ocupante/assistente ou à terceiros em decorrência destas alterações. Se o seu andador apresentar alguma anormalidade técnica, leve-o imediatamente ao revendedor (empresa autorizada para a comercialização). O atendimento deve incluir inspeção e posterior encaminhamento à Freedom. Se, mesmo após todas as orientações anteriores, você não estiver satisfeito com o atendimento recebido, entre em contato com o setor de Relações com Clientes da Freedom Veículos Elétricos LTDA. Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 155 – Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-290. Telefone: (53) 3284-0600. Atendimento também disponível via site https://freedom.ind.br e WhatsApp (53) 3284-0600. A equipe tomará as providências necessárias.

Os Andadores Freedom Walker Explorer exigem pouca manutenção de rotina. Para manter o funcionamento adequado por muitos anos, realize as seguintes verificações:

8.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÕES

Para higienizar o andador, nunca aplique água diretamente sobre o equipamento. Utilize apenas um pano macio umedecido com água e sabão neutro. Não use métodos de limpeza a quente, produtos abrasivos ou substâncias corrosivas.

A cada semana, verifique se o assento, o apoio de costas e o cesto apresentam afundamentos, cortes ou rasgos. Observe a ocorrência de desgaste excessivo ou deformação na estrutura do andador e suas partes (alças, manípulos, manetes, freio, garfos, rodas, apoio de costas, cesto e dispositivos de travamento). Inspecione visualmente se está faltando algum item de fixação da montagem (porcas, parafusos, arruelas, etc.). Substitua itens sempre que necessário.

8.2 REGULAGEM DA TENSÃO DOS FREIOS

Para ajuste dos freios e substituição de rodas, procure uma oficina especializada em bicicletas ou cadeiras de rodas.

Caso não haja acesso imediato a uma oficina, é possível fazer um ajuste temporário: gire a porca de regulagem no sentido horário para afrouxar o freio ou no sentido anti-horário para tensionar. Repita o procedimento para ambos os freios. Procure uma oficina o quanto antes para verificação definitiva.

8.3 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Recomendações de armazenagem e transporte dos Andadores Freedom Walker Explorer:

- Durante o transporte manusear com cuidado para evitar qualquer dano ao produto.
- Armazenar o equipamento longe de fontes excessivas de calor.

Condições de transporte e armazenagem:

- Temperatura: entre -10°C e 50°C
- Umidade: entre 10% e 95%
- Pressão atmosférica: entre 50 kPa e 106 kPa
- Manter ao abrigo da chuva
- Empilhamento máximo: 02 CAIXAS (considerando a caixa original do produto)

9 ADVERTÊNCIAS

1. Consulte um profissional da saúde para determinar se o produto atenderá às suas necessidades particulares, incluindo orientação para deslocamento seguro e ajuste de altura.
2. Consulte seu médico se você estiver fazendo uso de algum medicamento que possa afetar sua habilidade em operar seu andador de forma segura.

3. Não use este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem antes ler e entender completamente estas instruções. Mantenha este manual do proprietário à mão para poder consultá-lo a qualquer momento. Se você não estiver apto para entender os avisos, precauções e instruções, faça contato com um profissional da saúde, revendedores ou suporte técnico antes de tentar usar este equipamento.

4. Não utilize o andador nem o cesto além da capacidade de carga indicada. Consulte o ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

5. Andadores podem ser instáveis, portanto requerem cuidado no uso.

6. Verifique regularmente o funcionamento dos freios. Verifique se todas as partes estão firmemente fixadas ou se algum parafuso precisa ser ajustado. Não utilize o andador caso não esteja funcionando perfeitamente.

7. Com as rodas travadas, elas não devem se mover. Se houver movimento, regule os freios.

8. Substitua as rodas quando apresentarem sinais de desgaste.

9. Certifique-se de que seus dedos estejam livres do ponto de dobradura quando o andador estiver sendo aberto ou fechado.

10. Não pendure o seu corpo nas alças do freio. O andador pode tombar!

11. Use calçados apropriados (não escorregadios) para utilizar o andador.

12. Nunca use o andador para se deslocar caso ele não esteja completamente aberto e na posição travada.

13. Antes de se sentar no assento, certifique-se de que o andador esteja completamente aberto e na posição travada e que as rodas traseiras estejam travadas pelo freio de estacionamento.

14. Enquanto sentado, não utilize os pés para impulsioná-lo e nem deixe que empurrem o andador, pois ele não deve ser utilizado como cadeira de rodas.

15. Não use o assento caso o piso seja inclinado ou demasiadamente irregular.

16. Não fique de pé sobre o assento.

17. Não permaneça sentado no andador enquanto ele estiver em um veículo em movimento.

18. Não pendure objetos no apoio de costas.

19. Não utilize o andador em escadas ou escadas rolantes.

20. Antes de realizar manobras de elevação das rodas dianteiras para transpor pequenos obstáculos, pratique em local plano e seguro, com o auxílio de um acompanhante adulto.

21. Não armazenar o andador em ambientes úmidos, pois pode ocasionar mofo e oxidação das peças metálicas.

22. Não se desloque com o andador em vias públicas e estradas destinadas ao tráfego de automóveis. Obedeça às regras locais de tráfego de pedestre.

23. É preciso ter cuidado ao se deslocar em superfícies molhadas, inclinadas, desniveladas ou acidentadas.

10 DESCARTE

Estofamentos: Os estofamentos e partes em tecido devem ser higienizados e descartados juntos com o lixo doméstico para materiais inorgânicos.

Componentes metálicos: Para descarte, procure um ponto de coleta ou reciclagem de metais.

Componentes plásticos: Higienize e descarte no lixo doméstico para materiais inorgânicos.

Caso tenha dificuldades em localizar um centro de coleta adequado entre em contato com o órgão público responsável de sua cidade, com o revendedor ou com a Freedom.

11 CERTIFICADO DE GARANTIA

11.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Este termo de garantia é válido desde que acompanhado de cópia da nota fiscal da compra do produto perfeitamente preenchida, com identificação do proprietário e data de comercialização pela empresa vendedora.

11.2 GARANTIA

Pelo prazo de seis meses (sendo 3 meses de garantia legal e 3 meses de garantia contratual), a contar da data da emissão da nota fiscal e dentro das condições estipuladas nos "TERMOS DE GARANTIA".

11.3 TERMOS DE GARANTIA

A FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA., garante que estes são isentos de defeito de material ou de manufatura, em condições normais de uso. A obrigação da FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA. limita-se ao conserto ou substituição de quaisquer peças, dentro do período normal da garantia a que aludem estes termos, cujo exame feito pela mesma ou empresa autorizada pela mesma, revele satisfatoriamente para a Freedom, a existência do defeito reclamado. O conserto ou substituição das peças defeituosas será feito pela Freedom, sendo as despesas de fretes entre a revenda/assistência técnica e Freedom, dentro do território nacional, por conta da mesma, portanto sendo de livre escolha a transportadora. Os custos de frete entre o cliente e a revenda/assistência técnica, quando existirem, não são cobertos pela garantia. Os termos desta garantia não serão aplicáveis nos seguintes casos:

- O andador que tenha sido sujeito a uso inadequado, negligência ou acidente.
- O andador que tenha sido reparado ou alterado fora da Freedom, de modo que, no julgamento do mesma, sejam afetados seu desempenho e segurança.
- Serviços de manutenção, tais como troca de rodas, itens dos freios, etc.
- Deterioração habitual de estofados, partes em tecido e itens de aparência devido a desgaste ou exposição ao tempo.



Freedom Veículos Elétricos Ltda. Rua Conde de Porto Alegre, 155, Pelotas, RS, Brasil. CEP: 96010-290
Fone: 55 (53) 3284-0600
Para maiores informações, acesse o site: https://www.freedom.ind.br